

# Xiaomi nutikaal Mi Body Composition

## Kasutusjuhend



### ÜLEVAADE

Saa end paremini tundma 9-parameetrilise kehaanalüüsiga.

Lisaks kehakaalule, mõõdab Mi Body Composition nutikaal mitmeid parameetreid:

- lihasmass
- kehamassiindeks
- luumass
- veesisaldus
- rasvaprotsent
- vistseraalne rasv
- basaalainevahetus
- keha üldine hinnang


Xiaomi Mi Body Composition nutikaal kasutab bioelektrilise takistuse analüüsi ja keerukaid algoritme, et saada täpseimad tulemused.

Nutikaaluga ühilduv telefonirakendus Mi Fit kogub kõik mõõdetud parameetrid ning kuvab Sulle põhjaliku kokkuvõtte Sinu keha üldisest seisundist. Mugavad graafikud ja põhjalik info aitavad paremini Sinu progressil silma peal hoida.

Xiaomi Mi nutikaal oskab automaatselt tuvastada iga pereliikme ning salvestada kuni 16 kasutaja profiili. Tänu energiasäästlikule Bluetooth 4.0 ühendusele töötab kaal kuni 8 kuud (kasutades toiteks 4 × AAA patareid).

Xiaomi Mi Body Composition nutikaal on seni märkamatu, kui sellele peale astud – siis lööb kaalu LED ekraan särama ja selle unikaalne valgussensor kohaneb automaatselt ruumi valgusoludele. Mi Body Composition nutikaal on kõige õhemas punktis kõigest 14,75 mm paksune. Tänu minimalistlikule valgele korpusele sobib Xiaomi Mi nutikaal igasse interjööri.

### KASUTAMINE

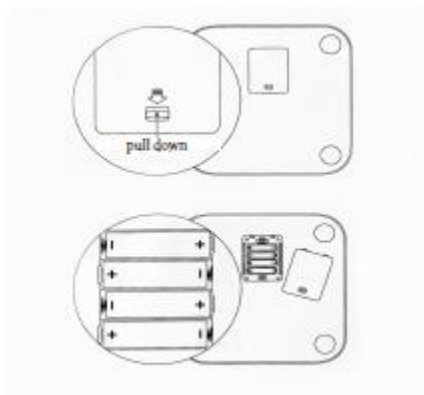


#### Patareide paigaldamine

Joonisel on näidatud kuidas avada patareipesa. Selleks liigutage alla patareipesa kaane lukk ja eemaldage kaas, sisestage 4 AAA patareid vastavalt juhiste ja asetage patareipesa kaas tagasi.

## Kaaluühiku valik

Kaaluühikuna on võimalik kasutada kg, jin ja pnd. Soovitud ühik on võimalik valida kaalu all oleva nupu abil, liigutades seda paremale või vasakule.

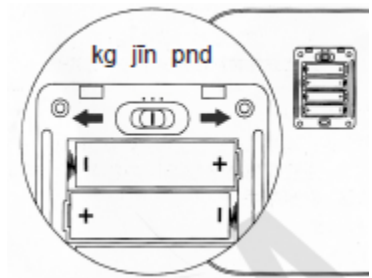

## Alustamine

Peale patareide paigaldamist asetage seade siledale, tasasele ja stabiilsele pinnale. Oodake, kuni kaalule ilmub tervituseks HELLO ja siis on teil võimalik sellele astuda ja ennast kaaluda. Kui kaalul hakkavad numbrid vilkuma siis see tähendab, et teie kaal on määratletud. Täpsete tulemuste saamiseks ärge asetage kaalu vaibale või mõnele muule pehmele pinnale.



### “Mi Fit” rakenduse installeerimine nutitelefonil

Et rakendus alla laadida, leidke Mi Store’ist, Play poest või Apple Store’ist rakendus “Mi Fit” või skännige kõrvalolevat QR koodi.

Märkus: Teil on vaja rakenduse kõikide funktsioonide kasutamiseks luua ka oma Mi-konto ja logida sinna sisse. Registreerida on võimalik siin: <http://i.mi.com>

## Nutitelefonil ühendamine kaaluga

Lülitage sisse telefoni Bluetooth ja avage rakendus “Mi Fit”. Jälgige ühendamiseks ekraanileilmuvaid juhiseid ja kasutage ühendamiseks kaalu registreerimisnumbrit. Peale ühendamist saate salvestada mõõtmistulemused, ja vaadata mõõtmistulemusi ning nende muutumist aja jooksul rakendusest.

## Kaalumine / mõõtmine


Asetage seade kõvale ja siledale pinnale. Seiske kaalule paljajalu nii nagu näidatud kõrvaloleval joonisel. Jälgige, et metallist anduritel oleks hea kontakt nahaga. Kui kaalunumber on määratletud siis hakkab kaal mõõtma keha muid näitajaid. Jääge kaalule seisma peale kaalunumbri ilmumist. Kaalunumbri all näete mõõtmise edenemise indikaatorit. Kui see vilgub, siis on mõõtmine lõppenud ja te saate siseneda Mi Fit rakendusse ning näha andmeid oma keha kohta.



Seadme mõõdetud andmeid soovitatakse kasutada ainult informatiivsetel eesmärkidel.

## Sümbolite tähendused

Kui kaalumise ajal kuvatakse kaalu ekraanil selline märk  või  siis annab kaal märku, et patareid on tühjaks saamas. Korrektsete mõõtmistulemuste saamiseks vahetage kohe seadme patareid.

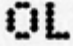Kui kaalumise ajal kuvatakse kaalu ekraanil selline sümbol  siis tähendab see seda, et ületatud on maksimaalne kaalu limiit 150kg.

### **Ohutusjuhised**

Ärge kasutage seadet märjal või libedal pinnal. Ärge pange seadet vette või muudesse vedelikesse.

Ärge kasutage seadet kui teie jalad või keha on märjad, see võib põhjustada libisemist, ebatäpseid mõõtmistulemusi või seadme kahjustusi.

Seiske kaalule sirgelt ja otse, pange mõlemad jalad paralleelselt kaalule

Kaalu pealispind on klaasist – ärge kukutage esemeid kaalule.

Kaalu puhastamiseks kasutage niisket ja pehmet lappi, ärge kasutage puhastamiseks puhastusvahendeid.

Kui patareid on tühjaks saanud siis eemaldage need kohe seadmest, et vältida patareide lekkimist ja seadme kahjustumist.